

CellTrics™

Innovative Zellfilter
für die schnelle
Probenvorbereitung





Einfache Einbindung in die Probenvorbereitung

Die Anwendung von CellTrics ist besonders einfach und lässt sich problemlos in jede Probenvorbereitung einfügen. Bereiten Sie zunächst Ihre Probensuspension wie bisher vor, etwa aus Lösungen, Zellkulturen, aufgearbeitetem Gewebe oder Pflanzenmaterial. Wählen Sie dann den CellTrics mit geeigneter Maschenweite, setzen Sie die Filtereinheit einfach auf ein Probenröhrchen Ihrer Wahl und filtrieren Sie die Suspension durch den CellTrics direkt in das Probenröhrchen. Nun können Sie sofort mit der Probenanalyse am Durchflusszytometer oder Zellsortierer beginnen oder führen mit dem Filtrat weitere Schritte für andere Anwendungen aus.

Vorteile auf einen Blick

- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Verfügbar in sieben Maschenweiten zu 5, 10, 20, 30, 50, 100 und 150 µm
- Einzeln steril verpackt oder unsteril im Beutel (siehe Tabelle) für verschiedene Anwendungen
- Besonders gute Laufeigenschaften auch bei kleinen Volumina durch Schrägstellung des Filters, seitliche Ventilationsöffnung (1) und -rinne mit abgeschrägtem Filtratauslauf
- 2 ml Fassungsvermögen der Filtereinheit (2)
- Verwendbar für Probenröhrchen mit unterschiedlichen Durchmessern von 3 bis 15 ml (3)

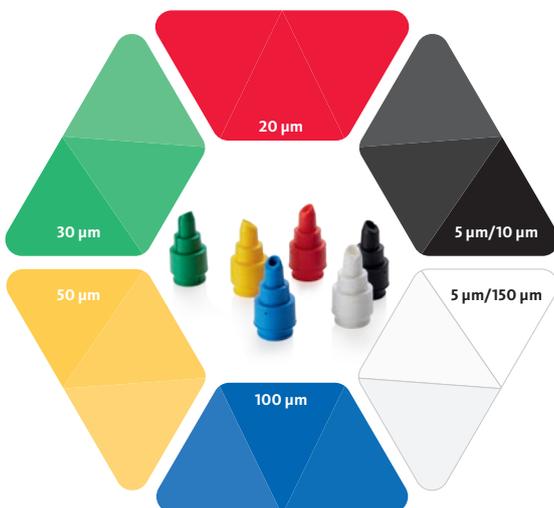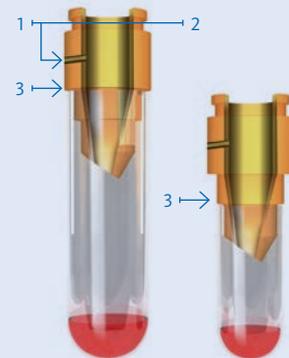

| Bezeichnung mit Maschenweite | Farbgebung | Bestellnummer (50 Stück, steril, einzeln verpackt) | Bestellnummer (250 Stück, unsteril, im Beutel) |
|------------------------------|--------------|--|--|
| CellTrics 5 µm | Schwarz-weiß | 04-004-2323 | 04-0042-2313 |
| CellTrics 10 µm | Schwarz | 04-004-2324 | 04-0042-2314 |
| CellTrics 20 µm | Rot | 04-004-2325 | 04-0042-2315 |
| CellTrics 30 µm | Grün | 04-004-2326 | 04-0042-2316 |
| CellTrics 50 µm | Gelb | 04-004-2327 | 04-0042-2317 |
| CellTrics 100 µm | Blau | 04-004-2328 | 04-0042-2318 |
| CellTrics 150 µm | Weiß | 04-004-2329 | 04-0042-2319 |

Mehr Informationen erhalten Sie in unserem Webshop unter www.sysmex-flowcytometry.com

Vertrieb Deutschland: Sysmex Deutschland GmbH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Deutschland · Telefon +49 40 534102-0 · Fax +49 40 5232302 · info@sysmex.de · www.sysmex.de

Vertrieb Schweiz: Sysmex Suisse AG
Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Schweiz · Telefon +41 44 718 38 38 · info@sysmex.ch · www.sysmex.ch

Vertrieb Österreich: Sysmex Austria GmbH
Lienfeldergasse 31-33, 1160 Wien, Österreich · Telefon +43 1 4861631 · Fax +43 1 486163125 · office@sysmex.at · www.sysmex.at

Hersteller: Sysmex Partec GmbH
Arndtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Deutschland · Telefon +49 3581 8746-0 · Fax +49 3581 8746-70 · info@sysmex-partec.com · www.sysmex-partec.com

Die für Ihre Region zuständige Sysmex Partec Niederlassung finden Sie unter www.sysmex-partec.com